


VCHEMY^S EVO
L'AMPIA
GAMMA DI
PROFILI
DISPONIBILI

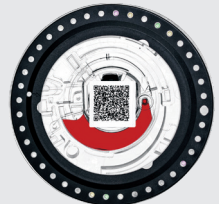

**ROTORI
INTERI**

*Parametri calcolati.

Con VodenEasynet
anche calcolo del
rischio cardiovascolare.

Tutti i kit sono
in confezioni
da 10 test cad.

PARAMETRI	GENERAL CHEMISTRY KIT VCS-01	LIPID KIT VCS-03	GENERAL PLUS KIT VCS-09	HbA1c VCS-10
ALB	●		●	
ALP	●		●	
ALT	●	●	●	
AMY	●		●	
AST	●	●	●	
CA			●	
CK	●		●	
Cl ⁻			●	
CREA	●		●	
GGT	●		●	
GLU	●	●	●	
HbA1c				●
HDL	●	●		
K ⁺			●	
MG ²⁺			●	
NA ⁺			●	
PHOS			●	
TB	●		●	
TC	●	●		
tCO ₂				
TG	●	●		
TP	●			
UA	●			
UREA	●		●	
A/G*	●			
eGFR*	●		●	
GLOB*	●			
LDL*	●	●		
U/C*	●		●	



**ROTORI A
SPICCHI**

*Parametri calcolati.

Con VodenEasynet
anche calcolo del
rischio cardiovascolare.

Tutti i kit sono
in confezioni
da 10 test cad.

PARAMETRI	RenalCare basic EVO-T28	CardiaCare EVO-T22	LipidCare EVO-T27	Renalcare EVO-T21	HepatiCare EVO-T29
ALB					●
ALP					●
ALT					●
AST					●
GGT					●
TB					●
DBIL					●
TP					●
ALT			●		
AST		●	●		
Ca				●	
CK		●			
CK-MB		●			
Cl				●	
CREA	●			●	
GLU			●		●
HBDH		●			
HDL			●		
K				●	
LDH		●			
Na				●	
TC			●		
TG			●		
UA	●			●	
UREA	●			●	
A/G*					●
GLOB*					●
eGFR*	●			●	
LDL*			●		
U/C*	●			●	

Voden Medical Instruments Vchem S[®] EVO - In questo brochure tutte le immagini e le caratteristiche sono puramente indicative e possono variare senza preavviso. Scheda Parametri Vchem S[®] EVO - 03/2026

VODEN

IL VOLTO DELL'EVOLUZIONE



VODEN MEDICAL INSTRUMENTS S.P.A.
Via della Vigna, 2 - 20821 Meda MB | ITALY
Tel. 0362-344417 Fax 0362-541220
voden@vodenmedical.com

vodenmedical.com

LA DIAGNOSTICA IN FARMACIA
CON NOI LA SICUREZZA DI FARE SEMPRE BENE

V^{CHEMY}S[®] EVO

**LA BIOCHIMICA
CON UN CLICK!
SEMPLICE, VELOCE
SENZA PENSIERI**

UTILIZZABILE SUBITO
dopo l'accensione

SEMPLICITA' D'USO
Solo 3 passaggi:
- Prelievo capillare
- Riempimento rotore
- Avvio test

Stessa procedura per tutti i rotori
Ridotta possibilità di errore

ELEVATA CONNETTIVITÀ
WI-FI e 2 porte USB



**PROFESSIONALITÀ
E AUTOMAZIONE
IN FARMACIA**

VChemistry S[®] EVO 4.0
esegue in automatico
le stesse operazioni
preanalitiche e analitiche
del laboratorio:

**CENTRIFUGA
E SEPARA**
il sangue intero

**VERIFICA L'IDONEITÀ
DEL CAMPIONE**
(indici del siero)

**PREPARA
I REAGENTI**

**VERIFICA LA BONTÀ
DEI REAGENTI**
(bianco reagente)

**CONTROLLA L'INTERO
PROCESSO DI ANALISI**

RILASCIA IL REPORT
con eventuale segnalazione
di valori anomali

4.0 Gode dei benefici fiscali
dell'industria 4.0

**I BENEFICI DI
V^{CHEMY}S[®] EVO 4.0
PER I TUOI UTENTI.**



ACCESSIBILITÀ AL SERVIZIO
Nessuna prenotazione. Vicino a casa
con la consulenza del proprio farmacista

RISULTATI RAPIDI



**ROTORE
A SPICCHIO**



**ROTORE
INTERO**

Tempi di analisi di soli 9 minuti con il rotore
a spicchio e 12 minuti con il rotore intero,
con stampa immediata e completa
dei valori di riferimento.




**ELEVATA CONVENIENZA
ECONOMICA**

**ROTORI V^{CHEMY}S[®] EVO 4.0
UN CAPOLAVORO
DI INGEGNERIA
DA OGGI IL ROTORE
SI DIVIDE IN 3**

**AMPIO PANNELLO DI TEST
ROTORE DAL DESIGN INNOVATIVO**

Oltre 40 test, suddivisi per profili d'organo,
per soddisfare le diverse esigenze dei
pazienti che possono scegliere tra una
vasta gamma di opzioni:
**dal pannello biochimico di base per un
check up generale, al profilo elettrolitico,
cardiaco, renale, epatico, coagulativo e
molti altri con soli 60 o 100 µL di
sangue intero capillare.**

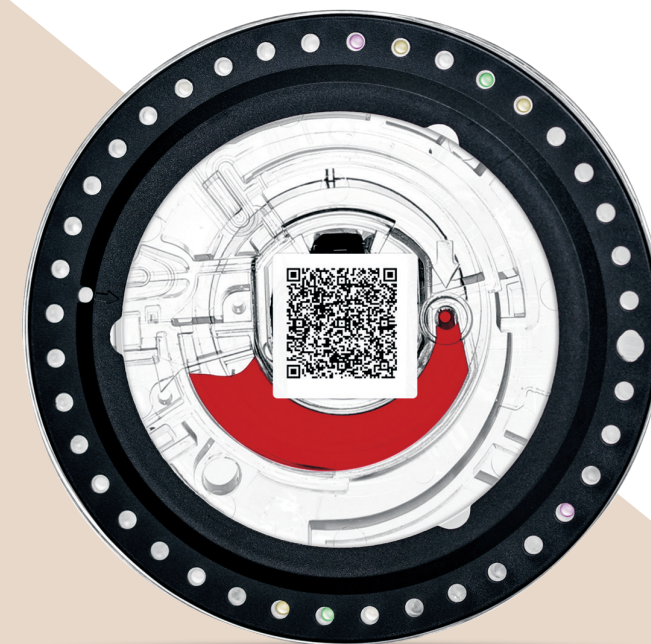

FLESSIBILITÀ OPERATIVA

Rotori ampi che offrono fino a 24 test
contemporaneamente per check up completi,
oppure i nuovi rotori a spicchi con mini-profilo
per indagini diagnostiche mirate con soli 60 µL
di campione (da 3 a 9 parametri).



ECONOMICITÀ D'ESERCIZIO
ZERO MANUTENZIONE.
Reagenti in confezioni da 10 test ciascuna.
Testi competitivi paragonabili al laboratorio,
<1 € a test.




SICUREZZA DEI RISULTATI
Sono applicati gli stessi criteri di analisi
dei laboratori. Lo strumento può lavorare su
siero | plasma | sangue intero capillare e venoso.
IQC per monitorare le procedure di analisi
VEQ per monitorare le performance
della farmacia verso il laboratorio.



**UN MODO
INTELLIGENTE E
CONVENIENTE PER
PERSONALIZZARE
IL PROFILO
DIAGNOSTICO E
OFFRIRE SEMPRE LA
SOLUZIONE PERFETTA
PER OGNI PAZIENTE!**

**TRANQUILLITÀ
DEL SERVIZIO**
Assistenza Tecnica online
con **VODENEASYNET** per
supportarti in ogni momento.

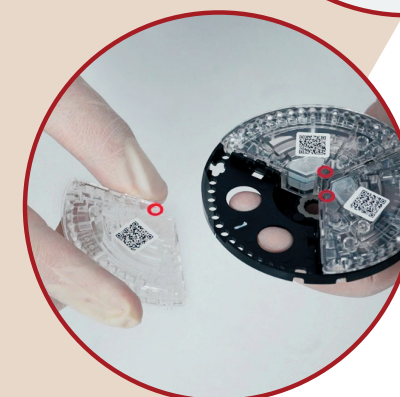

VODEN